

Scie à Ruban Diamanté EXAKT 300 EasyCUT




Points Forts

- › Modèle de paillasse, utilisable sur une paillasse hauteur standard
- › Plateau de travail en inox avec drainage intégré
- › Guide de coupe intégré pour une coupe facile, droite et régulière
- › Pas de risque de coupure pour les opérateurs
- › Circuit d'eau pour le refroidissement du ruban
- › Perte d'échantillon réduite lors de la coupe (Ruban de coupe disponibles en 0,1 mm ou 0,2 mm)
- › Protections anti-éclaboussures pour protéger les utilisateurs
- › Nettoyage facile

EXAKT 300 EasyCUT

La scie à ruban diamanté EXAKT 300 EasyCUT est parfaitement adaptée pour réaliser des coupes sur une grande variété d'échantillons différents et composites. Elle permet d'obtenir des coupes lisses, coplanaires selon le type d'échantillon et le ruban diamanté utilisé afin de répondre aux exigences de de qualité de surface les plus rigoureuses.

Que ce soit pour des applications industrielles applications scientifiques comme la coupe des os ou d'autres échantillons (muscles, implants, etc...) avec la scie EXAKT 300 EasyCUT vous pourrez réaliser aisément des coupes d'une épaisseur de 1 à 2 mm d'épaisseur.

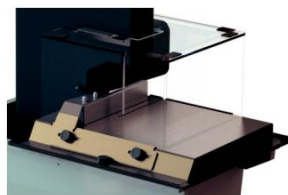

Données Techniques

Scie à Ruban Diamanté

exakt 300 EasyCUT

Dimensions

Hors tout (L x P x H mm)	1,000 x 800 x 850
Hauteur (mm)	800
Hauteur de travail (mm)	350
Poids (kg)	approx. 50
Vitesse du ruban de coupe (m/min)	10–560

Dimensions Maximum de l'échantillon

Hauteur (mm)	110
Largeur (mm)	70

Refroidissement / Lubrifiant

Connection eau courante (dia. mm)	6
Retour eau courante (dia. mm)	14
Remplissage max eau (l) approx.	5
Pompe de circulation de l'eau	yes
Max. Température (°C)	40

Connections Electriques

Version 1: Voltage (V)	1 x 220–240
Frequency (Hz)	50–60
Output (W)	120

Distributeur France :



TECH INTER

ZA DU CLOS DE VILLARCEAUX

78770 THOIRY

Tel : 01 34 94 20 40

Email : sales@tech-inter.eu