





## VACP- Unit

Automate d'impression pour  
cassettes

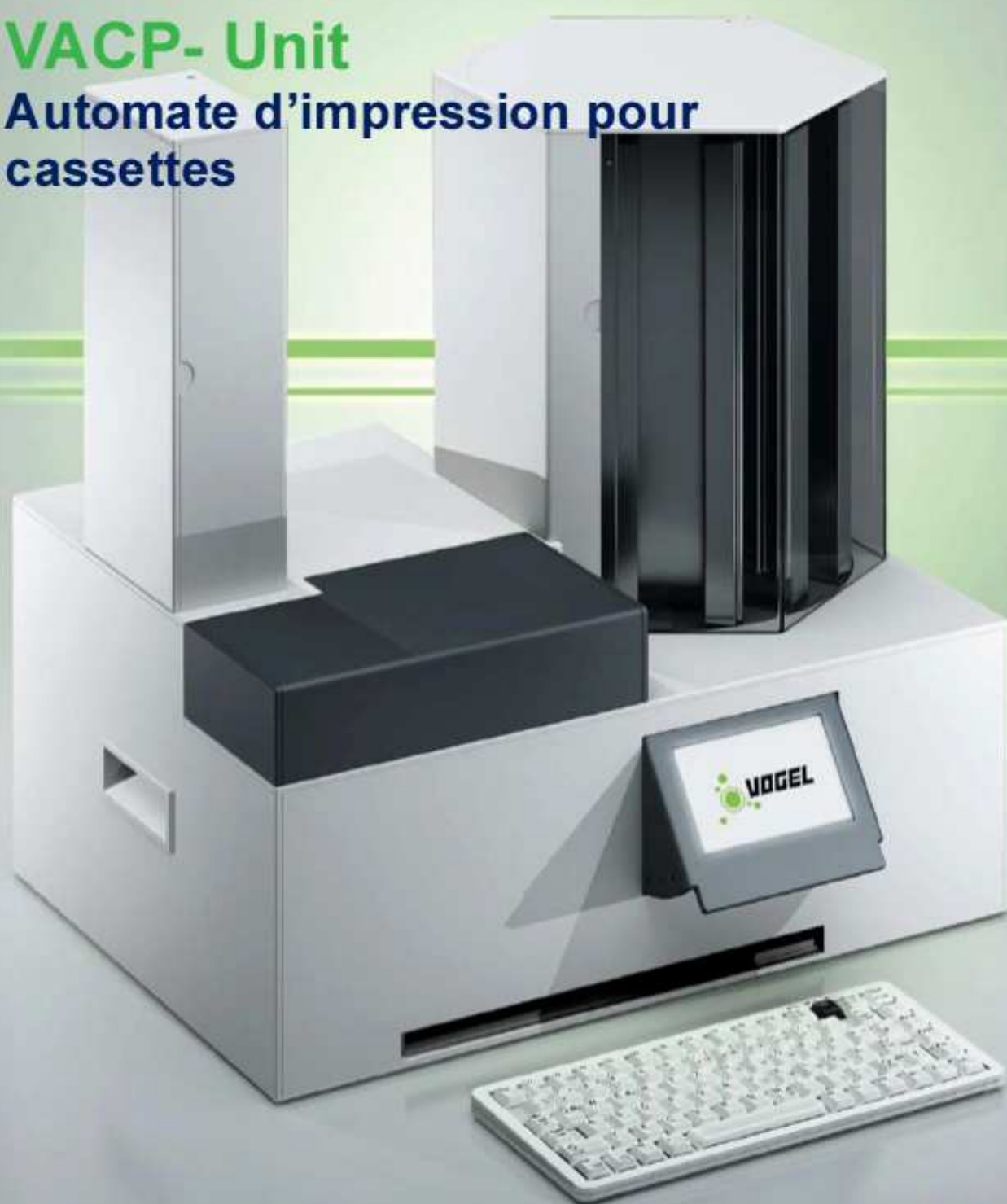

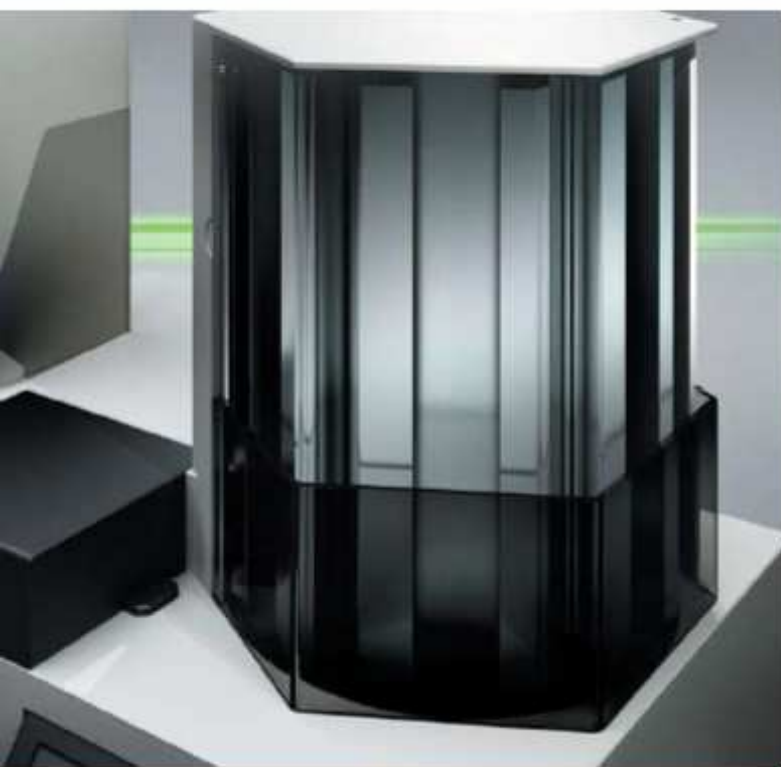

# Innovant et Efficace

## Système d'impression pour cassettes VOGEL

Cet automate pour impression des cassettes est équipé d'un carrousel de 6 chargeurs. De conception et de fabrication allemande, cet automate permet de répondre à vos besoins d'impression de cassettes en routine.

Fiabilité, Connectivité, rapidité et flexibilité sont les atouts de cet automate.

Il peut être utilisé de façon autonome avec son PC intégré ou relié sur un autre ordinateur, avec un lecteur code-bar (Y-Gate), connecté par LAN ou USB Windows-Driver et peut fonctionner avec les différents systèmes de Gestion de laboratoire. (SGL).

Le Carrousel comprend 6 compartiments mais également 6 adaptateurs pour cassettes sans couvercles.

En mode automatique, l'automate permet d'imprimer 700 cassettes par heure.

Le compartiment de réception permet de stocker jusqu' 50 cassettes imprimées.

Vous pouvez passer très rapidement du mode d'impression automatique au mode d'impression manuel.

## Impressions

**2 lignes, Police par défaut, sans code-bar:**

2 x 16 = 32 caractères

**2 lignes, Police par défaut, avec code-bar:**

2 x 11 = 22 caractères

**1 ligne, Majuscule, sans code-bar:**

1 x 13 = 13 caractères

## Avantages

- Modes d'impressions : Menu, Impression à la demande, Impression automatisée
- Lecteur code-bar adaptable (Y-gate)
- Impression d'une cassette en 3-3,5 seconds seulement
- La Connexion LAN permet de transférer facilement des données externes provenant d'un autre ordinateur à l'imprimante.
- USB Windows Driver
- Ruban encreur avec substance UV-sensitive et puce RFID.
- Impression résistante à toutes les solutions usuelles utilisées dans les laboratoires
- Encombrement réduit pour s'intégrer facilement dans votre espace de travail
- Fonctionne avec les cassettes standards
- Capable d'imprimer des caractères spéciaux.



La société **VOGEL** est distribuée sur le marché français par la société **TECH INTER** qui propose toute la gamme de systèmes d'impression manuels et automatisés pour lames et pour cassettes.

La société **VOGEL GmbH & Co. KG** a été fondée par Mr. Wilhelm Vogel puis rachetée par Marlies and Thomas Knauber en 1980. Aujourd'hui, la société **VOGEL** est toujours une société familiale. **VOGEL** produit, développe et vend des systèmes complets et équipements de haute qualité. La gamme se compose de mobilier en acier inoxydable ventilé, d'appareils de laboratoires, systèmes de rangement et de systèmes d'impression pour lames et cassettes.

Autres systèmes d'impression pour lames et pour cassettes proposés :



- Systèmes d'impression pour lames
- Systèmes d'impression pour cassettes
- Fabriqué en Allemagne

Distributeur France :

**TECH INTER**

ZA du clos de Villarceaux

78770 THOIRY

Tel : 01 34 94 20 40. Fax : 01 34 87 76 49

Email : [sales@tech-inter.fr](mailto:sales@tech-inter.fr)

Site : [www.tech-inter.fr](http://www.tech-inter.fr)

# **VOGEL**

*medical technology and electronic*  
VOGEL GmbH & Co. KG

Marburger Straße 81a  
D-35396 Gießen

Fon: +49 (641) 93 231-0  
Fax: +49 (641) 39 22 1

[zentrale@vogel-giessen.de](mailto:zentrale@vogel-giessen.de)  
[www.vogel-giessen.de](http://www.vogel-giessen.de)

