

SLIDEBEL DUO



ETIQUETEUSE AUTOMATIQUE DE LAMES



L'Impression thermique haute résolution associée à une mécanique de précision, SLIDEBEL est la garantie d'une impression parfaite de chaque étiquette avec une encre résistante aux solvants. Fonctionne avec tout type de lame.

Pourquoi Choisir Slidebel?

***Fonctionne avec tout type de lame**

Tous les types de lames porte échantillon peuvent être utilisées. Peu importe la couleur, la surface, la finition

*** Impression Rapide de grande qualité**


18 lames par minute.
Image nette et contraste vif

*** Compacte et Ergonomique.**

Dimensions réduites 34 x 14 cm.
Simple d'utilisation et intuitive

*** Connectivité ouverte.**

Compatible avec
tous les SGL et PC

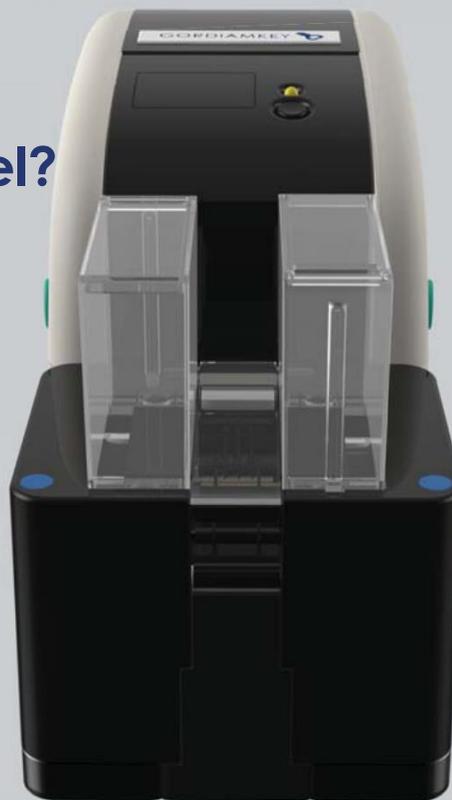

**Idéale
pour les
scanners**

DISTRIBUTEUR : TECH INTER
ZA DU CLOS DE VILLARCEAUX
78770 THOIRY Tel : 01 34 94 20 40. Email :
sales@techinterlab.fr site : www.techinterlab.fr

GORDIAMKEY 
www.gordiamkey.com

Chaque lame est parfaitement imprimée avec Slidebel!



Des étiquettes durables, résistantes aux produits chimiques et à la chaleur sont imprimées et appliquées avec précision sur les lames de microscope. Tous les types de lames peuvent être utilisés, peu importe la couleur, la surface, chargées ou pas et la finition des bords (bruts ou rodés). La tête d'impression thermique est positionnée en toute sécurité, évitant tout dommage causé par le contact direct avec le verre.

Obtenez des impressions nettes avec une longévité de plus d'1 million de lames imprimées avec une seule tête d'impression. Fonctionnement parfait avec tous les systèmes, de l'automate de coloration au scanner de lames.

Spécifications Techniques

Impression

Technologie	Transfert thermique
Printing media	Étiquettes Chemlabels (chemical resistant)
Ink type	Ruban Chemlabels (chemical resistant)

Capacité	3400 étiquet./rouleau
Résolution	200 - 300 dpi
Vitesse d'impression	18 lames / minute

Dimensions

Longueur	34 cm
Largeur	14 cm
Hauteur	20 cm
Poids	3.5 Kg

Lames

Type de lames	Toutes les lames types ISO 8037
Chargement	Chargeur / manuel
Capacité chargeur	50 lames
Sortie lames	Sur le PDT ou dans collecteur

Interface de communication

Data interface	USB / Ethernet (via print server)
LIS interface mode	Windows drivers
Logiciel création étiquettes	Bartender / Nicelabel