

## Scie à Ruban Diamanté EXAKT 302 Pathologie



### Points Forts


- › Sécurité de travail maximale
- › Conforme aux normes de sécurité et d'hygiène
- › Grand pare-éclaboussures pour un travail propre et sûr
- › Qualité de surface exceptionnelle de la coupe
- › Peu de perte de matière épaisseur de bande de 0,2 mm
- › Nouveau Ruban de coupe
- › Modèle de paillasse adapté à la hauteur de paillasse de laboratoire
- › Circuit d'eau pour le refroidissement et éviter la poussière
- › Options : pistolet de nettoyage et guide de coupe laser
- › Plan de travail avec guide de coupe et drain
- › Entièrement en acier inoxydable de haute qualité

EXAKT 302 Pathologie –

conçue pour les laboratoires avec un espace limité.

Qu'il s'agisse de tissus mous, d'os, de dents ou d'implants, l'EXAKT 302 coupe tous les échantillons rapidement, avec précision et en toute sécurité directement au laboratoire. Spécialement conçue pour l'histologie et la pathologie. Nos décennies d'expérience dans la production de scies à ruban diamantées ainsi que les retours d'expérience de centaines d'utilisateurs d'EXAKT dans le monde entier ont contribué au développement de cette scie compacte. Ainsi, nous vous proposons une solution de pointe conçue spécifiquement pour la sécurité de l'utilisateur, la commodité et la qualité du traitement des échantillons..

Avec l'EXAKT 302, même les plus petites découpes, d'une épaisseur de 1 à 2 mm épaisseur peuvent être réalisées à main levée avec une sécurité de travail maximale. Optimisez et réduisez le temps de traitement global de votre processus de préparation des échantillons

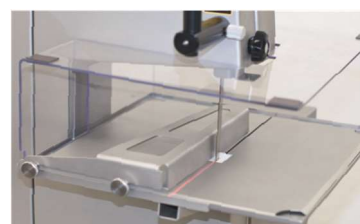

# DONNEES TECHNIQUES

---

Hauteur de travail (mm)	305–325
-------------------------	---------

---

Poids (kg )	40
-------------	----

---

Vitesse du ruban (m/min/) at 50 Hz	ca. 1,000
a 60 Hz	ca. 1,200

---

Largeur de la bande de coupe (mm) / épaisseur (mm) / grain	12 / 0,2 / D126
--	-----------------

---

## Dimensions de l'échantillon

---

Hauteur max de coupe (mm)	110
---------------------------	-----

---

Largeur max de coupe (mm)	180
---------------------------	-----

---

Plan de travail (L x P mm)	330 x 340
----------------------------	-----------

---

## Connexion pour l'eau

---

Tuyau (Ø mm)	9
--------------	---

---

SCIE A RUBAN DIAMANTE	EXAKT 302 Pathologie
-----------------------	----------------------------

---

## Dimensions

---

Emprise (L x P mm)	600 x 580
--------------------	-----------

---

Hauteur (mm)	720–740
--------------	---------

Pression max (bar)	6
--------------------	---

**Connection Electrique**

<b>Version 1:</b> Voltage (V)	1 x 220–240
-------------------------------	-------------

Frequency (Hz)	50–60
----------------	-------

Power (W)	180
-----------	-----

<b>Version 2:</b> Voltage (V)	1 x 100–110
-------------------------------	-------------

Frequency (Hz)	50–60
----------------	-------

Power (W)	180
-----------	-----

<b>Version 3:</b> Voltage (V)	1 x 100–115
-------------------------------	-------------

Frequency (Hz)	60
----------------	----

Power (W)	180
-----------	-----

<b>Options</b>	Guide de coupe laser
----------------	----------------------

	Pistolet de nettoyage
--	-----------------------

**EXAKT**

EXAKT 302 Pathology

Hauteur de connexion (mm) au-dessus de la surface de la table 245

Exakt Advanced Technologies GmbH

Robert-Koch-straße 5 · D-22851 norderstedt / Germany · T +49 (0)40.52 95 60-0 · F +49 (0)40.5 24 99 59 · info@exakt.de · www.exakt.de